

Inspired
by drive



LÍNEA ESPECIALIZADA

Una pequeña sonrisa
puede contar una gran historia

Las familias con necesidades especiales inspiraron la creación de la línea de productos **Inspired by Drive**, diseñada para proporcionar soporte de posicionamiento, independencia y movilidad tanto en el hogar como en la escuela y sobre la marcha.

La línea **Inspired by Drive** otorga la libertad de jugar, integrarse y participar en la vida diaria las 24 horas del día. Contamos con una amplia gama de productos que garantiza que su hijo reciba el mejor apoyo

necesario para eliminar barreras de su entorno proporcionándole gran seguridad y confianza.

Nuestra prioridad es proporcionar la mejor opción a sus seres queridos con productos que brinden a sus pequeños esa independencia y fortaleza que ayudarán a mejorar radicalmente su calidad de vida.



Diseñados para poner una sonrisa en la cara de ese ser especial

1 Andadera Posterior **Nimbo**



La andadera posterior NIMBO proporciona soporte y seguridad al caminar a usuarios con deambulación limitada. Es ligera, de altura ajustable y plegable, lo que facilita su traslado y almacenamiento. Las ruedas delanteras y traseras de 5" están fabricadas de caucho de alta calidad que proporciona mayor seguridad al no patinarse cuando está frenada. Las ruedas traseras pueden ser configuradas para solo girar (andar) hacia delante (para aquellos usuarios con deambulación limitada).

La empuñadura de textura suave y ergonómica aumenta la comodidad al usar el andador.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio, con acabados en varios colores.
- Altura ajustable en la 4 patas.
- Ruedas delanteras giratorias, con mecanismo de fijación.
- Ruedas traseras con seguro anti-reversa, este dispositivo permite la movilidad hacia adelante o hacia atrás.
- Andadera con sistema de plegado a través de dos botones laterales.



Cotenido: 1 pieza
Empaque: Corrugado

EXTRACHICA



- ANKA1200PDR
- ANKA1200ADR
- ANKA1200RDR
- ANKA1200NDR

DIMENSIONES

ANCHO	60.96 cm
ANCHO INTERNO	13.5"
LARGO	50.8 cm
ALTURA DE LOS MANUBRIOS	39.73 a 49.53 cm
PESO	4.08 kg

Soporta 34.5kg

CHICA



MEDIANA



GRANDE



EXTRAGRANDE



- ANKA2200PDR
- ANKA2200ADR
- ANKA2200RDR
- ANKA2200NDR

DIMENSIONES

ANCHO	60.96 cm
ANCHO INTERNO	13.5"
LARGO	68.58 cm
ALTURA DE LOS MANUBRIOS	48.26 a 63.50 cm
PESO	4.53 kg

Soporta 38.5kg

DIMENSIONES

ANCHO	66.04 cm
ANCHO INTERNO	15"
LARGO	78.74 cm
ALTURA DE LOS MANUBRIOS	58.42 a 77.47
PESO	5.9 kg

Soporta 68 kg

DIMENSIONES

ANCHO	67.31 cm
ANCHO INTERNO	16.5"
LARGO	88.36 cm
ALTURA DE LOS MANUBRIOS	71.12 a 91.44 cm
PESO	6.35 kg

Soporta 86 kg

DIMENSIONES

ANCHO	73.66 cm
ANCHO INTERNO	17.75"
LARGO	50.8 cm
ALTURA DE LOS MANUBRIOS	93.18 a 104.14 cm
PESO	7.25 kg

Soporta 113 kg

« ADITAMENTOS PARA ANDADERAS Nimbo »

2 Soportes para Brazos



CARACTERÍSTICAS

- Altura y profundidad ajustables.
- Las empuñaduras se extienden hacia adelante y hacia atrás, en posición supina y prona, son de ángulo ajustable.
- Apoyabrazos curvados y con bordes flexibles.
- Correa con velcro para evitar que los brazos se deslicen.



Contenido: 1 par

Empaque: Corrugado

MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER
ANCHO	11 cm	28 cm
ALTO	31 cm	13 cm
LARGO	36 cm	37 cm
PESO	1.8 kg	2.3 kg

■ KA1035FPSDR
■ KA1035FPLDR

3 Estabilizador Pélvico



CARACTERÍSTICAS

- Ancho ajustable.
- Almohadillas traseras y laterales.
- Cinturón de soporte.
- Recomendado para usuarios que tienen una postura asimétrica y no se pueden mantener centrados en el andador.
- Acompañado de una almohadilla para asiento cómoda y acolchonada.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER
ANCHO	15 cm	18 cm
ALTO	13 cm	14 cm
LARGO	22 cm	25 cm
PESO	1.10 kg	1.47 kg

■ KA1050DR

4 Asiento Plegable



- 1» EXTRACHICO 13.5"
■ KA1285DR
- 2» CHICO 13.5"
■ KA2285DR
- 3» MEDIANO 15"
■ KA3285DR
- 4» GRANDE 16.5"
■ KA4285DR

CARACTERÍSTICAS

- Se pliega hacia arriba para ponerse de pie o caminar y se despliega para sentarse cuando sea necesario.
- Se coloca en el andador estándar Nimbo.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

5 Asiento-Arnés



- CHICO
■ KAA1070CDR
GRANDE
■ KAA1070GDR

CARACTERÍSTICAS

- El arnés de asiento se mueve según la manera de caminar, lo que permite al usuario trasladar el peso de una pierna a la otra.
- Correas ajustables hacia la parte delantera o trasera del armazón del andador.
- Ayuda a soportar el peso.
- Posiciona la pelvis correctamente y se puede usar como una correa de seguridad.



Contenido: 1 pza.


Empaque: Corrugado

6 Carriola Miko



■ KAWCMWCF2PDR
■ KAWCMWCF2BDR

Soporta 30kg

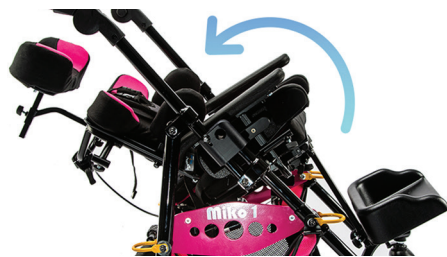

CARACTERÍSTICAS

• La carriola pediátrica MIKO es la combinación de una carriola especializada PCI y una carriola moderna y lujosa. Disponible en 2 divertidos colores (azul y rosa) y 2 tamaños diferentes. La carriola pediátrica MIKO tiene una innovadora estructura deportiva, con asiento lujoso, cómodo y moderno, diversas posiciones y soportes a elegir de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Recomendable para niños con movimientos limitados.

SISTEMA DE INCLINACIÓN (TILT-IN-SPACE)

• Cuenta con un sofisticado sistema de inclinación para abatir el asiento que automáticamente proporciona alivio de presión, ya que redistribuye la presión en la espalda del niño.

SOPORTE DE POSTURA

• El sistema de inclinación Tilt-In-Space del asiento y del respaldo les permite posicionarse en varios ángulos, proporcionando mayor comodidad al niño al estar sentado por periodos largos. Los descansabrazos son ajustables y desmontables.

ASIENTO CON SISTEMA REVERSIBLE CON QUICK LOCK

• El sistema Quick Lock facilita de manera práctica su transporte y almacenamiento ya que cuenta con nuestra tecnología patentada, permitiendo que el asiento se pueda posicionar tanto al frente como hacia atrás.

DISEÑO DEL ASIENTO MEJORADO

• Incluye almohadas ajustables para ancho y profundidad.

GANCHOS PARA TRASLADO

• Incluye ganchos para asegurar la carriola en cualquier vehículo de transporte. La carriola MIKO cuenta con pruebas de seguridad para transportación.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado



MEDIDAS	■ WCM-1000	■ WCM-2000
Longitud total	105 cm	105 cm
Altura total	104 cm	104 cm
Ancho promedio	66 cm	71 cm
Longitud doblada	84 cm	84 m
Altura plegada	43 cm	43 cm
Peso	8.60 kg	9 kg
Asientos Flexi	WCF-1000	WCF-2000
Altura de la espalda	28 - 34 cm	28 - 48 cm
Ancho del tronco	16.5 - 24 cm	20 - 28 cm
Ancho de la cadera	20 - 28 cm	25.5 - 35.5 cm
Profundidad del asiento	20 - 30.5 cm	28 - 38 m
Altura del asiento al piso	53.5 cm	53.5 cm
Ángulo de inclinación	-5 - 40°	-5 - 40°
Asiento al ángulo trasero	0° - 180°	0° - 180°
Altura del descansapies	16.5 - 31.5 cm	20.5 - 38 cm



7 Carriola Trotter



Asiento	Soporta	Producto
12"	34 kg	CATR1200FRDR
14"	45 kg	CATR1400FRDR
16"	77 kg	CATR1600FRDR
18"	113 kg	CATR1800FRDR

	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	PESO TOTAL
CATR1200	9" a 13"	15 kg
CATR1400	10" a 14"	15.5 kg
CATR1600	11" a 15"	16 kg
CATR1800	12" a 16"	16.5 kg

La nueva generación de la carriola pediátrica TROTTER es ligera y plegable, incluye asiento y respaldo acolijnados en color rojo.

La profundidad del asiento, así como su tensión, se pueden ajustar según las necesidades y requerimientos del usuario, además de que se adapta según su crecimiento.

El respaldo cuenta con un sistema de soporte que mejorará la postura brindando gran comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis plegable con correa para mantenerla cerrada.
- Altura del asiento: 24".
- Ángulo de asiento ajustable: 5° y 22°.
- Ángulo de respaldo ajustable: 85°, 90° y 95°.
- Ruedas delanteras de 8" y traseras de 10", con freno de palanca.
- El arnés tiene 5 puntos de posicionamiento.
- Descansapies abatibles y desmontables.
- Altura de los manubrios: 41.5".
- Altura del asiento a la paleta del descansapie: 4" a 20".



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado



8 Silla de Ruedas Wallaby



Soporta 68 kg

- 1 >> 12" ■ SRWB1200RDR
- 2 >> 14" ■ SRWB1400ARDR

CARACTERÍSTICAS

- Silla de ruedas pediátrica plegable, proporciona movilidad, comodidad y seguridad.
- Perfecta para un usuario activo.
- Descansabrazos tipo escritorio acolchonados, descansapies abatibles, correa para pantorrilla y cinturón pélvico.
- Empuñaduras con altura ajustable.
- Cumple con los requisitos de seguridad WC19 en usuarios de entre 23 y 36 kg (incluyen soportes de tránsito estándar).



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

1 >>	MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER	2 >>	MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER
	ANCHO	49 cm	28 cm		ANCHO	57 cm	28 cm
	ALTO	88 cm	84 cm		ALTO	84 cm	84 cm
	LARGO	95 cm	74 cm		LARGO	98 cm	74 cm
	PESO	15.9 kg	18.3 kg		PESO	16.3 kg	18.8 kg



9 Silla de Ruedas PCA y PCI



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio en color azul.
- Ancho del asiento 15" y 19".
- Asiento, respaldo y cabecera tapizados en tela.
- Cabezal ajustable.
- Incluye arnés de seguridad.
- Reclina de 90° hasta 160°.
- Incluye dos palancas, una para reclinar el respaldo y la otra para reclinar completamente la silla.
- Descansabrazos rectos y desmontables.
- Cojines laterales y cojín abductor tapizados en tela.
- Elevapiernas abatibles y desmontables.
- Ruedas traseras de 15" con rin de policarbonato.
- Ruedas delanteras de 6".
- Sistema antivuelco.
- Soporta 110 kg.



Empaque: Corrugado

MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER
ANCHO	53 cm	34 cm
ALTO	98 cm	100 cm
LARGO	150 cm	88 cm
PESO	25 kg	27.5 kg

MEDIDAS	PRODUCTO	MÁSTER
ANCHO	61 cm	33 cm
ALTO	180 cm	100 cm
LARGO	170 cm	86 cm
PESO	27 kg	29 kg

- 15" SR958PCIAMs
- 15" SR958PCIRMs
- 19" SR958PCAAMs
- 19" SR958PCARMs



10 Asiento para Auto Spirit



Diseñado tanto para niños como adolescentes, ofrece al usuario y familiares seguridad día a día, ya que es un asiento exclusivo que combina el uso de un asiento de auto tradicional con niveles óptimos de seguridad, proporcionando el posicionamiento especializado que el usuario requiere. Su respaldo y asiento, acojinados de Memory Foam, ofrecen mayor comodidad, debido a que cuenta con mayor espacio entre los hombros.

Soporta gran rango de peso y altura (hasta 59 kg y 168 cm), lo que permite el crecimiento del usuario sin necesidad de adquirir otro asiento especializado. Su diseño único de concha puede complementarse con accesorios especializados (opcionales) de la misma línea, como: abductores, soportes de cadera y torso, abatibles, que facilitan transportar al paciente de manera práctica y segura.

AC2401MGDR



AC2400SGDR



CARACTERÍSTICAS

- Estructura con diseño de concha, que permite que el usuario crezca sin tener que cambiar el asiento.
- Respaldo y asiento acojinado con Memory Foam.
- Cabezal acojinado, altura ajustable.
- Rango de altura: hasta 167.64 cm.
- Rango de peso: de 11.3 a 59 kg.
- Abductores y soportes de cadera y torso, abatibles.
- El arnés de 5 puntos de posicionamiento, con protectores acojinados en los hombros, cumple con todos los estándares federales de seguridad en vehículos y aeronaves.
- Niveles de posicionamiento para el arnés: mín. 25.5, 28, 34, 40.5, 47, 52 y 60 cm.
- Profundidad del asiento: 12".
- Ancho interior del asiento: 15".
- Ancho en la parte de hombro: 18".
- Ángulo del asiento al respaldo: 98°.
- Peso máximo soportado: 59 kg.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

MEDIDAS	PRODUCTO
ANCHO	54 cm
ALTO	71 cm
LARGO	30.5 cm
PESO	13.60 kg



11 Silla Ducha Otter



- SDOT1000DR
- SDOT1000BBDR
- SDOT1000LLDR
- SDOT2000DR
- SDOT2000BBDR
- SDOT2000LLDR
- SDOT3000DR
- SDOT3000BBDR
- SDOT3000LLDR

La silla ducha pediátrica OTTER proporciona soporte y seguridad para niños al bañarse. Puede ajustar el ángulo, tanto del respaldo como del asiento, para acomodarse a las necesidades de cualquier usuario. Las 4 patas son antiderrapantes para mayor seguridad, y son de altura ajustable hasta 7". La silla OTTER incluye soportes laterales que se pueden utilizar para mejorar el posicionamiento de la cabeza o torso.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de plástico, cubierta de tela, que se puede remover y lavar en lavadora.
- Respaldo ajustable a 5 ángulos: 0°, 22°, 45°, 67.5° y 90°.
- Las patas traseras se abren o se cierran para ajustar la altura.
- 2 correas para seguridad y protección del usuario.
- Plegable para su fácil almacenamiento.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado



	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	ALTURA DEL RESPALDO	LARGO DE LA SILLA	ALTURA DEL USUARIO	PESO DE LA SILLA	SOPORTE MÁXIMO
SDOT1000	33 cm	45.5 cm	81 cm	Hasta 91.5 cm	4.9 kg	27.2 kg
SDOT2000	33 cm	63.5 cm	95 cm	81 a 127 cm	5.4 kg	54.4 kg
SDOT3000	42 cm	81 cm	122 cm	117 a 172 cm	6.3 kg	72.5 kg

12 Base Otter



STOT8020DR

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero, esmaltado con pintura electrostática en color blanco.
- 4 ruedas giratorias con freno en cada una de ellas.
- El seguro Quick-Release permite montar y desmontar fácilmente la Silla Ducha Otter.
- Altura: 51 cm.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado